

**VEGAS**  
COSMETICS

**SKIN CELL TRONIC 2.0**

› Manuel de l'utilisateur



› Équipement pour soins de beauté avec ultrasons, ionisation et photothérapie

- › Cet équipement a été développé exclusivement pour des soins de beauté et d'esthétique dans le confort de votre maison. Le Skin Cell Tronic n'est pas conçu pour des traitements médicaux ou de maladies. Les Cosmétiques Vegas ne pourront être responsables de dommages causés par un usage contraire aux fonctions décrites dans ce manuel.
- › Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le Skin Cell Tronic. Si vous avez des questions, veuillez les communiquer à votre conseiller Cosmétiques Vegas ou directement à nos services avant d'utiliser cet appareil. Conservez ce manuel dans un endroit sûr en cas de besoin.
- › Utilisez cet équipement uniquement en combinaison avec les produits de Cosmétique indiqués dans ce manuel.

## Indice

◆ Informations importantes à propos de votre Skin Cell Tronic	1
◆ Informations pour une utilisation sûre	2
◆ Présentation des différentes fonctions	4
◆ Le rechargement	6
◆ Les indications de traitement de la peau et utilisation	7
◆ Traitement général de la peau	7
◆ Traitement anti-âge	8
◆ Traitement des troubles de pigmentation	10
◆ Traitement de la peau avec impuretés	10
◆ Traitement des peaux sensibles	10
◆ Garantie	12

## Fiche Technique

◆ Dénomination de l'appareil:	Skin Cell Tronic
◆ Modèle Ref:	SCT02 – Code: 460
◆ Tension Entrée:	AC 100-240V
◆ Tension batterie:	15V, 400 mA
◆ Dimensions:	170 x 46 x 50mm
◆ Poids:	132g
◆ Fréquence des Ultras sons:	3MHz ±5%



## Informations importantes à propos du Skin Cell Tronic

- ◆ **Ionisation:** dissocie “grâce au courant galvanique continu”, les molécules des substances actives des produits de traitement en ions, envoyant ces précieuses substances actives dans les couches profondes de la peau. Réduit simultanément les imperfections du visage, les rides, cernes des yeux et produit un effet lifting immédiat.
- ◆ **Ultra son:** Ce dispositif de soin ultra-sons atteint une fréquence maximum de 3 millions d’impulsions par seconde. La plus récente technologie, combinée à un haut degré de sécurité. La profondeur des impulsions se limite aux couches superficielles de la peau, et donc adaptée au traitement des zones sensibles du visage telles que le contour des yeux. La haute fréquence de vibrations ultrasoniques massent votre peau en profondeur, en réordonnant les cellules, ce qui permet une meilleure absorption des ingrédients actifs du produit de traitement. En outre elle stimule la production de collagène et d’élastine. Les vagues légères d’ultra-sons produisent une exfoliation douce et non invasive de la peau, n’ éliminant que les cellules mortes et les impuretés indésirables.
- ◆ **Photothérapie:** La lumière froide LED basse fréquence de différentes couleurs est la garantie d’un traitement individuel et unique pour votre peau.
- ◆ **Flash Bleu:** Particulièrement recommandé pour les peaux sensibles, grasses et pour les éruptions cutanées. Apaise et réduit l’inflammation de la peau (par exemple: tâche de sensibilité, l’excès de sébum et les impuretés). La production de sébum est équilibré et la peau est efficacement débarrassée des impuretés et des sécrétions sébacées excessives. La peau devient saine et gagne de l’élasticité avec le traitement.
- ◆ **Flash rouge:** Convient à tous les types de peau, stimule la production de collagène et d’élastine naturelle et améliore la circulation sanguine. La peau gagne en élasticité et en douceur. Les légères vagues de lumière rouge sont particulièrement adaptées aux zones autour des yeux et sur le front.
- ◆ **Flash Vert:** Particulièrement adapté aux peaux mixtes. En plus de l’amélioration de l’absorption de l’oxygène, produit un effet relaxant sur la micro- musculature du visage, ce qui provoque un plus grand relâchement de la peau.

Les différents types de lumières améliorent l’ absorption des substances actives du produit de soin. Le Skin Cell Tronic a l’avantage de pouvoir effectuer un traitement avec plusieurs lumières en même temps que l’ionisation et les vibrations de l’ultra-son.

Le design du Skin Cell Tronic a été spécifiquement conçu pour répondre aux plus délicats contours du visage, assurant ainsi une manipulation facile et un résultat exceptionnel.

## Informations pour une utilisation en toute sécurité

- › Le Skin Cell Tronic a pour seul but le traitement esthétique pour une peau saine et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- › Suivez les instructions décrites dans ce manuel.
- › Nous recommandons de réduire le temps des premiers traitements, surtout si vous êtes sujet à des réactions allergiques cutanées.
- › Le traitement doit être arrêté immédiatement en cas de réactions indésirables.

## Le dispositif ne peut pas être utilisée dans les circonstances suivantes

- › Pendant la grossesse
- › Si vous avez une prothèse en métal ou silicone dans le visage
- › Si vous avez des plaies ou blessures sur le visage
- › Brûlures solaires
- › Infections de la peau ou dermatite
- › Irritation de la peau ou dermatites
- › Après l'ingestion de stéroïdes, d'hormones ou en cas de faiblesse de la fonction hépatique
- › Si vous avez des pièces métalliques dans le corps
- › Problèmes cardiaques (en particulier ceux avec Pace maker)

**Le Skin Cell Tronic ne doit jamais être utilisé directement sur la gorge ou les yeux.**

## Remarque

Pour votre propre sécurité, lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le Skin Cell Tronic. Cet appareil est un instrument de précision. Pour utiliser le Skin Cell Tronic avec succès, il est important de comprendre et suivre les informations indiquées dans ce manuel. Toute mauvaise utilisation annule la garantie du fabricant.



## Testez votre peau contre les allergies:

1. Testez sur le poignet, avec la peau bien propre.
2. Appliquez le produit de traitement (ex.: Hyaluron Gel) et observez les réactions de la peau. En cas de réaction désagréable lors de ce test, arrêtez immédiatement le traitement.
3. Si vous ne ressentez aucune réaction désagréable, vous pouvez utiliser l'appareil et le produit de traitement.
4. Si à tout moment vous ressentez un certain inconfort ou une réaction allergique, interrompez immédiatement le traitement.



## Informations pour une utilisation appropriée du Skin Cell Tronic

1. Gardez l'appareil dans un endroit sec. Ne le plongez jamais dans l'eau. Les composants électroniques de l'équipement peuvent s'abîmer ou provoquer un court-circuit.
2. N'essayez jamais de démonter ou d'ouvrir l'appareil. L'appareil ne peut être réparé que par des techniciens autorisés.
3. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. L'utilisation d'un transformateur ou d'un mauvais câble peut provoquer un mauvais fonctionnement et annuler la garantie.
4. Tenez l'appareil hors de portée des enfants, car il ya risque d'avaler des petites pièces.



ATTENTION

### Informations de sécurité importantes



Ne pas essayer de démonter l'appareil



Conserver hors de la portée des enfants




Conserver à l'écart des sources de chaleur



Conserver dans un endroit sec



Conserver dans un endroit sûr

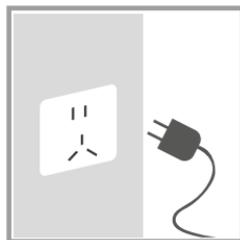

Ne pas utiliser de connecteur, sauf celui fourni avec l'appareil

## Présentation des différentes fonctions du Skin Cell Tronic

- Ultra-son avec 3 millions d'impulsions par seconde
- Ionisation (courant galvanique continu)
- Surface de contact (applicateur) en acier inoxydable de haute qualité

Lumière Rouge: 12 LED  
Lumière Bleu: 12 LED  
Lumière Verte: 12 LED  
Forte énergie, très concentré!



Électrode galvanique  
de ionisation



Indicateur de puissance du massage

Indicateur de ionisation (ion+ ion-)

Indicateur ultra-sons

Voyant d'alimentation

Programmes de traitement prédéfinis

Bouton sélecteur d'ionisation

Marche / Arrêt ultra-sons

Marche / Arrêt Photon (photothérapie)

On / Off (Marche / Arrêt)

CLEANSE

ANTI-AGE

SENSITIVE

ION

SONIC

POWER  
CHARGE

COMBI

ION

SONIC

PHOTON

ON/OFF




- Le contact de l'électrode est essentiel pour le bon fonctionnement de l'ionisation. Placez toujours votre doigt indicateur sur l'électrode du dispositif pour fermer le circuit du courant galvanique. Si vous utilisez le Skin Cell Tronic sur une autre personne, vous devez être en contact constant avec elle au long du traitement, pour assurer la fermeture du circuit.

## Chargement

- Pendant la recharge de la batterie le voyant d'alimentation clignote et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
- Quand la capacité de la batterie est sous les 3V, tous les voyants clignent simultanément et l'appareil s'éteint automatiquement.
- Le Skin Cell Tronic est équipé d'une batterie rechargeable au ion-lithium. Cette batterie doit toujours être entièrement rechargée après son déchargement total (voir ci-dessus).
- Vous pouvez utiliser l'appareil pendant le processus de chargement. Charger complètement le Skin Cell Tronic avant la première utilisation.

## Maintenant, vous pouvez tester le fonctionnement du Skin Cell Tronic

- Placez l'appareil sur une surface plane et humidifiez de quelques gouttes d'eau l'applicateur.
- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton **Marche / Arrêt** et appuyez sur le bouton **Sonic** pour activer l'ultra-son. Maintenant, choisissez l'intensité désirée (**low** - basse, **high** - haute).
- Si les gouttelettes d'eau vibrent, l'ultra-son fonctionne correctement.

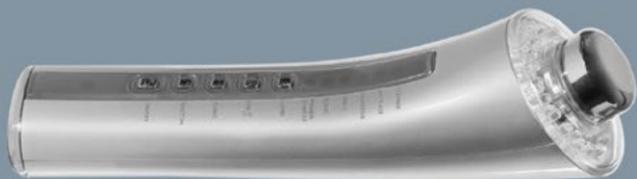


Nous recommandons l'utilisation des produits cosmétiques de traitement Vegas Cosmetics, en particulier le Hyaluron Gel, pour assurer une transmission efficace et plus large des ondes ultrasonores.

Au cours de la ionisation (ION), l'appareil émet un signal sonore "bip" toutes les 5 secondes. Cette alerte sert à calculer les différents types de traitement (par exemple: 1 bip pour chaque zone d'acné ou 5 bips pour chaque tache de pigmentation) et de se rappeler de se déplacer d'un point à l'autre de la zone à soigner. Après 10 minutes d'utilisation, le Skin Cell Tronic émet une alerte sonore et s'éteint automatiquement, afin de finaliser cette étape de traitement. Vous pouvez alors rebrancher l'appareil et continuer avec la prochaine étape de traitement. Pour mettre fin à une étape de traitement ou interrompre l'utilisation de l'appareil plus tôt que les 10 minutes, appuyez simplement sur le bouton **Marche / Arrêt**.



## Indications pour utilisation et soin de la peau

Appliquez une quantité généreuse de Gel de traitement Vegas Cosmetics, sur votre visage et étalez sans masser. Ensuite, placez un peu du produit directement sur l' applicateur du Skin Cell Tronic. Posez doucement l'applicateur sur votre visage et commencez le massage. Si l'appareil ne glisse pas facilement sur la peau, augmentez la quantité de produit sur l'applicateur (généralement entre 4g à 5g de produit par séance de traitement) pour obtenir la lubrification nécessaire, ce qui garantit un bon glissement du dispositif sur la peau. Pendant le traitement, vous devez toujours vous assurer de la présence suffisante de gel sur l'applicateur. Par conséquent ajoutez progressivement le gel nécessaire jusqu'à terminer la séance de traitement.

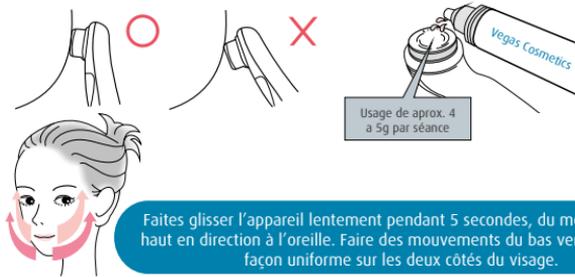


Faites glisser l'appareil lentement pendant 5 secondes, du menton ver le haut en direction à l'oreille. Faire des mouvements du bas vers le haut de façon uniforme sur les deux côtés du visage.

## Traitement total de la peau

Le Skin Cell Tronic ne doit être utilisé que 3 fois par semaine, par séances ne dépassant jamais plus de 30 minutes.

## Première étape: Nettoyage en profondeur de la peau

1. Enlevez le maquillage avec un démaquillant et nettoyez la peau, par Ex. Lait démaquillant ou mousse de la gamme Q10, l'Aloe Vera ou Mousse Nettoyante au Hyaluron.
2. Appliquez une quantité suffisante de lait ou de mousse de nettoyage sur le visage et sur le Skin Cell Tronic. (Nous recommandons l'utilisation des produits de la gamme Vegas).
3. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour brancher l'appareil, sélectionnez la fonction **CLEANSE** à l'aide de la touche **COMBI**
4. Faites glisser le Skin Cell Tronic sur le visage, selon les indications des figures ci-contre, toujours du bas vers le haut. Faites de même sur d'autres zones du visage.
5. Nettoyez votre visage avec de l'eau et stimulez la peau avec le tonique facial de la gamme Vegas Cosmetics. Nettoyez l' applicateur du Skin Cell Tronic avec un chiffon humide ou si nécessaire, utilisez un produit désinfectant (spray ou de l'alcool).

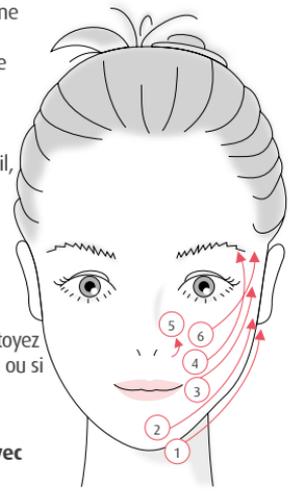

**Produits conseillés par Vegas Cosmetics (en accord avec la gamme de traitement):** Mousse et Lotion Tonique à l'Aloe Vera, Lait Nettoyant Q10, Mousse Hyaluron Care et Gel Nettoyant Sensitive Concept.

## Deuxième étape: Soignez votre peau et obtenez un teint rajeuni et aspect brillant

1. Appliquez une quantité suffisante de gel hyaluronique sur le visage et sur le Skin Cell Tronic.
2. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour brancher l'appareil, sélectionnez la fonction **Anti-Âge**, à l'aide de la touche **COMBI**
3. Faites glisser le Skin Cell Tronic sur le visage, selon les indications des figures de la page 37. Déplacez l'applicateur lentement pendant 5 secondes entre la zone du menton et l'oreille. Répétez le même type de massage sur d'autres zones du visage.
4. Après le traitement appliquez un produit hydratant (p. ex: crème de jour ou de nuit Q10 ou Crème de jour et de nuit au Hyaluron).

**Produits conseillés par Vegas Cosmetics, pour ce traitement:** Hyaluron Gel pour ce traitement; Crème de jour ou nuit Q10, Crème de jour ou nuit Aloe Vera ou Crème de jour et de nuit au Hyaluron pour l'hydratation après le traitement.

## Troisième étape: Photon thérapie (photothérapie) Séance de traitement avec lumière LED

1. Appuyez sur le bouton **Marche / Arrêt** pour brancher l'appareil, sélectionnez **Photon** (Lumière-LED) et le type de lumière désirée. **Rouge:** aide à la réduction des rides et stimule la production naturelle de collagène et d'élastine. **Bleu:** effet anti-inflammatoire pour les impuretés de la peau et traitement de l'acné. **Vert:** Pour un effet relaxant et de détente des micro-muscles du visage.
2. Après avoir sélectionné la lumière LED désirée, faites glisser l'applicateur sur la peau, de point en point, sur les zones que vous souhaitez traiter.

Chaque zone a besoin de 10 à 30 minutes de traitement.

**Astuce:** Vous pouvez également utiliser la fonction de **Photon** (photothérapie) en même temps que les fonctions décrites pour le traitement dans la deuxième étape. Pour ce faire, il suffit d'ajouter la fonction Photon aux fonctions énoncées ci-dessus.

## Traitement Anti-Aging

(Pour réduire les rides dans les zones des yeux, de la bouche, du nez et du front)


### Première étape:

Nettoyez la peau en profondeur (Procédez en accord avec la première étape du traitement total de la peau)


### Deuxième étape:

1. Appliquez une quantité suffisante de gel hyaluronique sur le visage et l'applicateur du Skin Cell Tronic.
2. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour brancher l'appareil, sélectionnez la fonction **Anti-Âge** à l'aide de la touche **COMBI**, en ajoutant **PHOTON** (lumière rouge)
3. Faites glisser le Skin Cell Tronic sur le visage, selon les indications des figures de la page 37. Déplacez l'applicateur lentement pendant 5 secondes entre la zone du menton et l'oreille. Gardez le même type le massage sur d'autres zones du visage.
4. Après le traitement appliquez un produit hydratant (p. ex: Crème de jour et de nuit au Hyaluron ou Crème de jour ou nuit Q10 de Vegas Cosmetics).


**Produits recommandés par Vegas Cosmetics, pour ce traitement:** Hyaluron Gel pour le traitement; Crème de jour et de nuit au Hyaluron, Crème de jour ou nuit Q10.

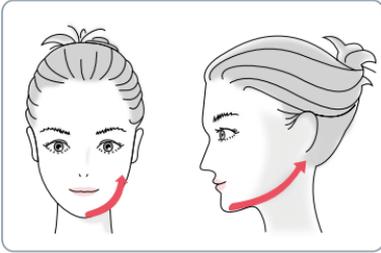


1. Faites glisser de la base vers le haut en lignes symétriques

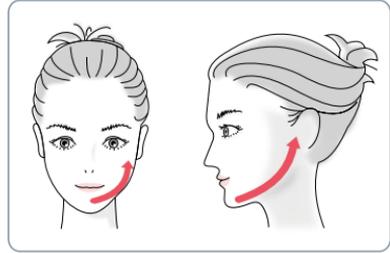


2. Faites glisser du menton à l'oreille

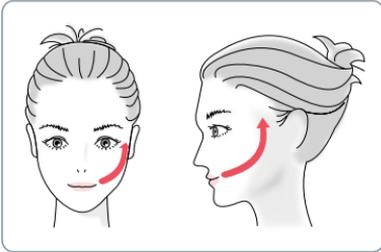


3. Du coin de la bouche jusqu'à l'oreille

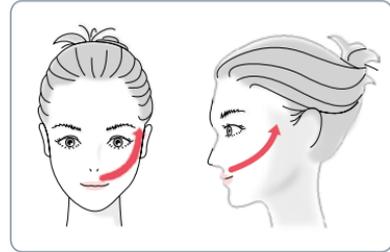

4. Du nez au sourcil

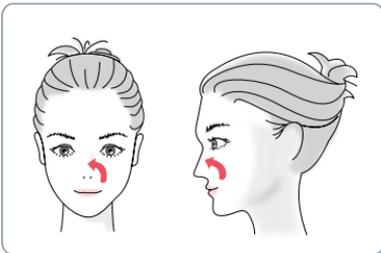

5. De dessous jusqu' au bout du nez

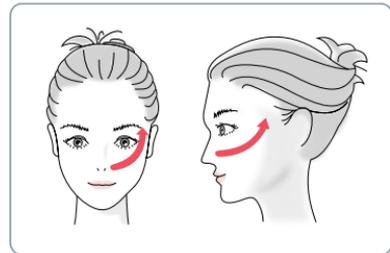

6. Du nez jusqu' au front

## Traitement des troubles de pigmentation

(Tels que les taches de vieillesse et de pigmentation)

### Première étape:

Nettoyez la peau en profondeur (Procédez en accord avec la première étape du traitement total de la peau)

### Deuxième étape:

1. Appliquez une quantité suffisante de gel hyaluronique sur le visage et l'applicateur du Skin Cell Tronic.
2. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour brancher l'appareil, sélectionnez la fonction **Anti-Âge** à l'aide de la touche **COMBI**, en ajoutant **PHOTON (lumière bleue)**
3. Faites glisser l'applicateur pendant 20 à 30 secondes (5-6 bips) de point en point (zones de traitement des taches). De cette façon, vous assurez le timing correct du traitement à chaque endroit.
4. Après le traitement appliquez un produit hydratant (p. ex: Crème de jour et de nuit au Hyaluron ou Crème de jour ou nuit Q10 de Vegas Cosmetics).

**Produits recommandés par Vegas Cosmetics, pour ce traitement:** Hyaluron Gel pour le traitement; Crème de jour et de nuit au Hyaluron, Crème de jour ou nuit Q10.

## Traitement de la peau avec des impuretés (acné) ou grasses

(Soir)

### Première étape:

Nettoyez la peau en profondeur (Procédez en accord avec la première étape du traitement total de la peau)

### Deuxième étape:

1. Appliquez une quantité suffisante de Serum Sensitive Concept sur le visage et l'applicateur du Skin Cell Tronic.
2. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour brancher l'appareil, sélectionnez la fonction **SENSITIVE** à l'aide de la touche **COMBI**, en ajoutant **PHOTON (lumière bleue)**
3. Faites glisser l'applicateur pendant 5 secondes (1 bip) d'un point à l'autre des zones à traiter (éruptions). De cette façon, vous garantissez le timing correct pour le traitement de chaque zone d'impuretés, tout en réduisant l'inflammation et l'irritation de la peau avec la lumière bleue.
4. Après le traitement appliquez un produit hydratant (p. ex.: Crème pour le visage 24 heures Sensitive Concept).



**Produits recommandés par Vegas Cosmetics, pour ce traitement:** Gel nettoyant Sensitive Concept pour un nettoyage en profondeur; Serum Sensitive Concept pour les impuretés de la peau et crème de jour ou nuit avec Crème pour le visage 24 heures Sensitive Concept pour l'hydratation.

**Astuce:** Vous pouvez prolonger le traitement **Photon** (Lumière-LED), en n'utilisant que cette fonction sans les traitements supplémentaires du Skin Cell Tronic. De cette façon, vous pourrez continuer à soigner votre peau pendant 10 à 20 minutes, avec la lumière bleue LED, après avoir terminé le traitement décrit ci-dessus. Cela réduit considérablement l'irritation et l'inflammation de la peau.



## Troisième étape: Drainage lymphatique (désintoxication)

Appuyez sur la touche **ON/off** pour brancher l'appareil et sélectionnez **SONIC** (ultrason). Suivez les mouvements de massage comme indiqué sur l'image. Cela garantit un drainage efficace (désintoxication) des ganglions lymphatiques.



## Traitement de la peau sensible et "hyper-sensible"

1. Suivez les étapes indiquées dans les traitements ci-dessus, en utilisant uniquement la fonction **SONIC (ultra-son)** Sonic sans ionisation (**ION+/ION-**).
2. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter la fonction **Photon** (Lumière-LED rouge, bleue ou verte).
3. Après le traitement, appliquez un masque régénérateur (p. ex.: masque hydratant Aloe Vera).
4. Ensuite, vous pouvez appliquer vos produits habituels.



Observation:

En plus de la fonction COMBI, il est possible de sélectionner chaque fonction individuellement ou de les combiner individuellement.

## Garantie

Modèle du produit:

Skin Cell Tronic (code: 460)

Date d'achat:

Lieu d'achat:

Conseiller/ère Vegas Cosmetics:

1. En cas de défaillance du matériel ou de toute autre anomalie au cours des 24 premiers mois suivants la date d'achat. Vegas Cosmetics vous garantit une réparation pendant 2 ans.
2. Dans ce cas, renvoyez l'appareil à un/e de nos Conseillers/ères ou directement à notre adresse ainsi que la facture et le certificat de garantie d'origine.
3. Toute utilisation contraire aux instructions contenues dans ce manuel, annule la garantie.
4. Une mauvaise utilisation, telle que:
  - a. Tentative d'ouvrir l'équipement;
  - b. Dommages causés par le transport lui-même;
  - c. Dommages causés par chutes, utilisation violente qui endommagent les composants de la machine;
  - d. Dommages causés par l'exposition à l'eau / l'humidité ou à des températures excessives;

annule la Garantie!

5. Ce Certificat de garantie ne peut être remplacé ou complété. Gardez-le en lieu sûr.



› Équipement pour soins de beauté avec ultrasons, ionisation et photothérapie

VEGAS COSMETICS GmbH  
OTTO-HAHN-STR.13  
64823 GROSS-UMSTADT

TEL.: +49 (06078) 96 81 10 | FAX: +49 (06078) 96 81 11  
[www.vegascosmetics.fr](http://www.vegascosmetics.fr) | [info@vegascosmetics.de](mailto:info@vegascosmetics.de)



